

Photron



Photron FASTCAM Viewer
for High Speed Digital Imaging **4**

Ver. 4.4.0.0 新機能紹介

全般

範囲保存機能の複数個所対応

よく使うツールメニューをクリックツールバーへ登録


表示速度/保存速度向上

ステッチング画像への情報保存機能追加

FASTCAM Mobile改善


範囲保存機能の複数個所対応

高解像度カメラ等で撮影した後、今までは複数個所を部分拡大して保存する際に、拡大箇所の数だけ保存処理をする必要がありました。今回から、一度で複数個所を保存できるようになりました。

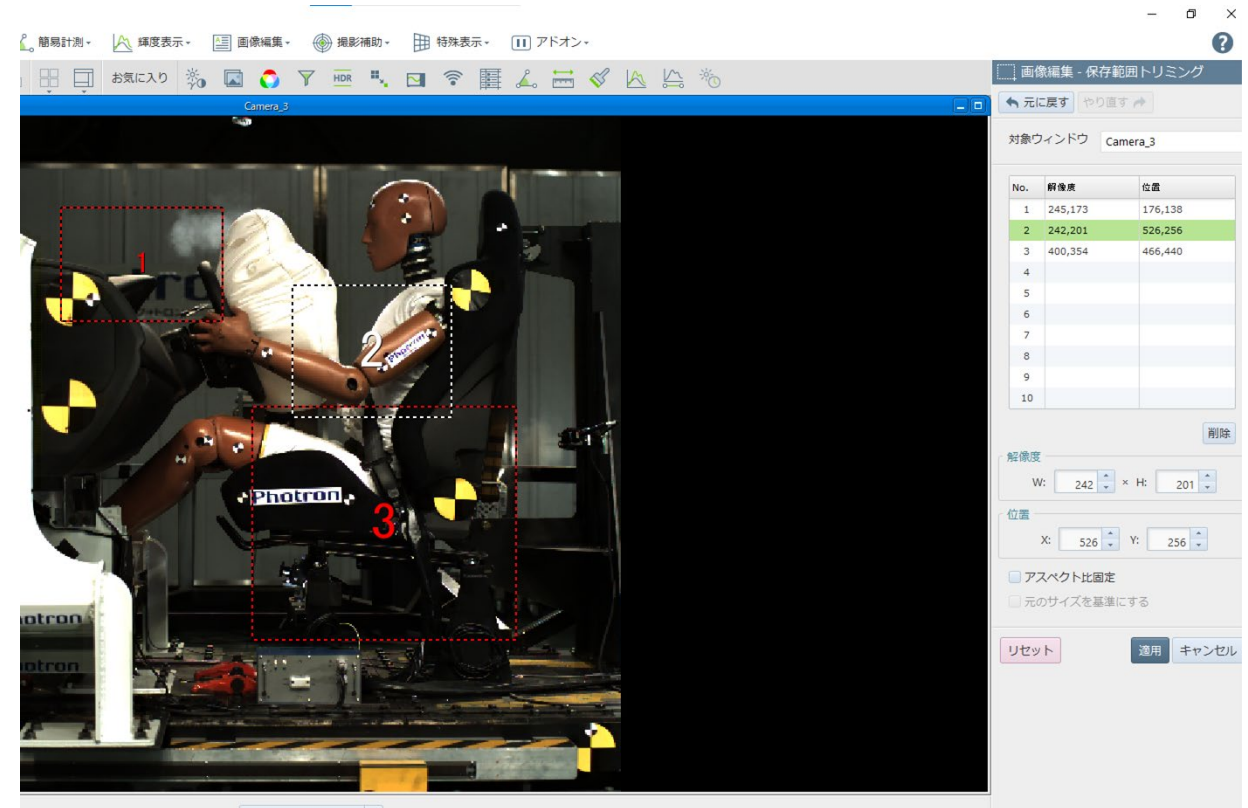

よく使うツールメニューをクリックツールバーへ登録

日々の撮影で、使用頻度が高い機能だけをクイックツールバーに登録できるようになりました。
機能を探す手間や、クリック回数の低減に役立ちます。

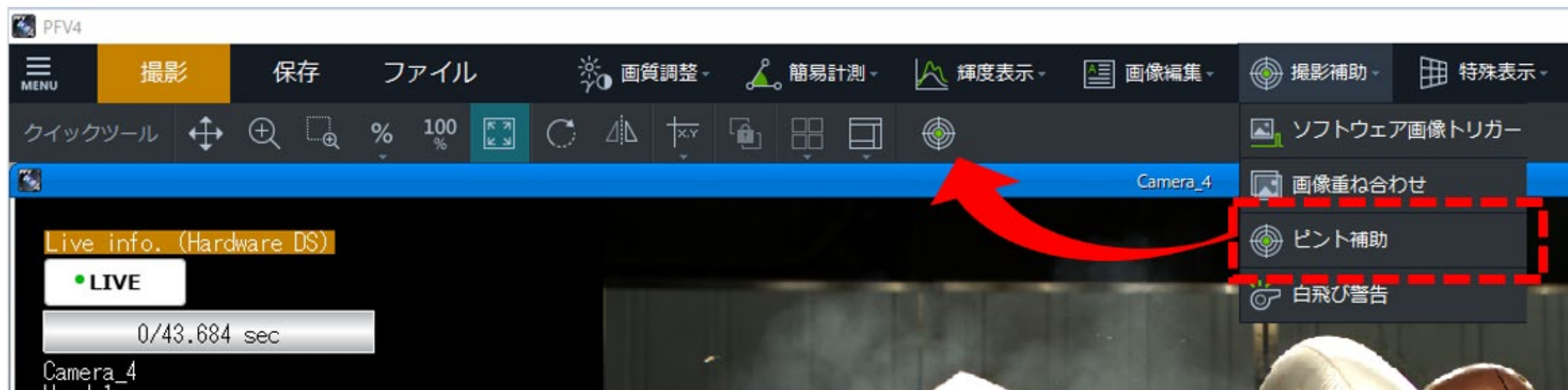

表示速度/保存速度向上

処理の一部をGPU処理に変更したことで、下記機能が向上されます。

- ライブ画面やメモリ画面での表示がスムーズになります
- 保存速度が向上します
- メモリ画面や保存したデータを表示するときの再生がスムーズになります
- 保存データのデータ変換速度が向上します

※現状上記改善はNVIDIA社製GPU搭載のPCを使用した場合となります。

スティッチング画像への情報保存機能追加

AVIやMP4等汎用的な動画フォーマットで保存する際、撮影速度等の条件を画面内に埋め込む情報保存機能が、スティッチング機能を使用して作成したデータにも反映する事ができるようになりました。



FASTCAM Mobile改善

現場で使用する際に、設定の確認し忘れ等を防止する為に、FASTCAM MobileのUIを改善しました。

- 画像に反転や回転処理を行っている場合には、対象の処理のボタン色を変更
- 画像の拡大率を100%表示させました
- レンズ制御の項目に「更新」を追加しました



株式会社フォトロン

イメージングソリューション事業本部

E-mail : image@photron.co.jp

本社	〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング21階 TEL. 03-3518-6271 FAX.03-3518-6279
名古屋営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-5-28 伊藤忠丸の内ビル7階 TEL.052-232-2149 FAX.052-201-1269
豊田営業所	〒470-1206 豊田市永覚新町3-47-1 TEL.0565-30-0029
大阪営業所	〒530-0055 大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル6階 TEL.06-7711-9066 FAX.06-7711-0266
福岡営業所	〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-22 福岡SRPセンタービル TEL.092-687-5551 FAX.092-687-5552

インターネットホームページ
<https://www.photron.co.jp/service/hsvcam/>

記載の意匠や仕様は、予告無しに変更されることがあります。
記載の製品名等は、各社の登録商標または商標です。